

Graciella[®]

Cadeira ginecológica



Mulheres no centro de atenção e cuidados

Mulheres no centro de atenção e cuidados

O exame preventivo é um dos procedimentos realizados com mais frequência em clínicas ginecológicas. A cadeira ginecológica Graciella® permite que o médico trabalhe com seus pacientes de forma ergonômica e seus elementos de design funcionais são ajustados para aumentar o conforto e a segurança dos pacientes.

31% das mulheres

vão ao ginecologista 1x ao ano. 52% das mulheres vão ao ginecologista com menos frequência, não regularmente ou não vão ao ginecologista.⁽¹⁾

Câncer cervical

é o quarto tipo de câncer mais comum em mulheres do mundo todo.⁽²⁾ O exame preventivo e o tratamento pré-canceroso em mulheres até 30 anos são o método mais eficiente de prevenir essa doença.⁽³⁾



O exame básico, que inclui ultrassom, em um local e altamente ergonômico.



Os exclusivos elementos de design consistem em duas colunas que possibilitam a fácil colocação da cadeira em diversas posições.



O design elegante aumenta a confiança antes e durante o exame.





Manuseio simples

Os ginecologistas examinam cerca de 20 pacientes por dia em uma clínica ginecológica, dependendo de outros fatores. A ergonomia e a intuição do equipamento, especialmente da cadeira ginecológica, têm sua função em todas as partes do trabalho. Graciella® foi desenvolvida com atenção em detalhes, considerando a ergonomia, bem como o demorado trabalho dos ginecologistas.



Controlador manual

O mecanismo rotativo permite que o controlador seja acessado de vários ângulos.



Ultrassom diretamente na cadeira

A cadeira pode ser facilmente ajustada na posição horizontal para que o ginecologista possa examinar a paciente usando o ultrassom sem precisar movê-la para a cama de exames.



O controlador com os pés permite que a cadeira seja ajustada rapidamente mesmo durante o exame.

Posições predefinidas

As posições predefinidas permitem que a cadeira seja alterada para duas posições mais comuns.



Posição sentada



Posição de exame

Posicionamento dos apoios das pernas

A gama de posições permite que os apoios das pernas sejam ajustados de forma conveniente e de acordo com as necessidades do ginecologista, ao mesmo tempo que mantém a paciente confortável.



Desenvolvida para mulheres

O tratamento ginecológico preventivo é algo que toda mulher adulta deve ter frequentemente em sua vida. Um ambiente agradável e o conforto aumentam a confiança da paciente.

Ajuda sem atrapalhar

Há um degrau para ajudar a paciente a subir na cadeira, desenvolvido com um mecanismo rotativo. Ele pode ser movido para os lados de forma que não atrapalhe o exame.



O design e a forma ergonômica da cadeira, bem como o estofado macio, garantem o conforto da paciente.

A paciente pode subir com segurança na cadeira com o degrau e as opções de ajustes da altura.



Design agradável

O posicionamento variável permite que a cadeira seja ajustada ao físico de cada paciente. O conforto da paciente também é aprimorado pelo estofado macio e a forma ergonômica da cadeira. Um apoio de cabeça integrado também está incluído.



Apoios de pernas personalizados

A cadeira Graciella® tem vários apoios de pernas disponíveis que podem ser selecionados de acordo com o objetivo, foco e exames ginecológicos mais comuns de cada instalação de cuidados da saúde. Os apoios de pernas podem ser ajustados de acordo com as necessidades do paciente e do ginecologista.



*Apoios de
pernas
Goepel*



*Apoios de
pernas
padrão*

As colunas facilitam a higiene e a peza

A cadeira Graciella® é equipada com um exclusivo design de colunas. A função principal das unidades das colunas telescópicas e eletricamente acionadas é ajustar a altura. Essa solução de design propicia valor agregado extra com seus excepcionais parâmetros de higiene.

Colunas resistente a contaminantes

A coluna é feita de alumínio eletroliticamente oxidado e uma fina camada de lubrificantes em sua superfície. O espaço entre os cilindros da coluna telescópica é preenchido com espaçadores plásticos que garantem que nenhum contaminante caia na coluna.



A unidade da coluna é muito fácil de limpar devido às suas forma simples e acabamento liso.



As elegantes colunas do sistema de duas colunas criam um espaço entre a área de deitar e o chassi, permitindo a total descontaminação de toda a cadeira.

lim-



Higiene do estofado

O estofado sem costuras também faz parte do exclusivo conceito de higiene da cadeira Graciella®. O material é modificado para possibilitar a fácil descontaminação usando métodos higiênicos comuns.



Roda retrátil

A cadeira é fácil de movimentar pela clínica graças à roda retrátil no chassi, especialmente, quando o piso sob e ao redor da cadeira estiver sendo limpo.

Solução de design

Graciella® é uma cadeira ginecológica com um exclusivo design de colunas. Apresentando design elegante e funções ergonômicas, a cadeira Graciella® ajuda a criar um ambiente confiável e moderno para exame ginecológico.





Acessórios




Degrau integrado



Recipiente em aço inoxidável



Recipiente de plástico

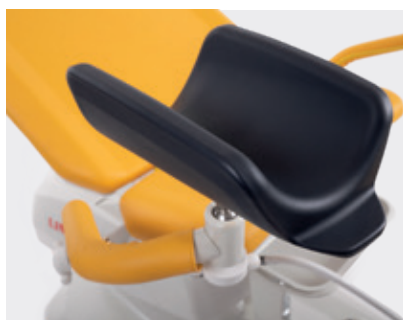

Apoios de pernas tipo Goepel



Apoios de pernas com estofado parcial



Apoios de pernas com estofado



Suporte para rolo de papel (padrão)



Suporte para coloscópio



Placa das pernas



Suporte da barra EU



Suporte para infusão



Reforço plano




Rodas de manipulação



Proteção plástica na parte inferior da cadeira



Lâmpada LED

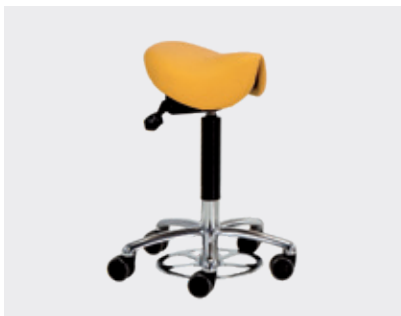

Cadeira do médico – pés ajustáveis e ergonômicos



Cadeira do médico – altura ajustável, travamento manual



Cadeira do médico – ergonômica, altura ajustável, travamento manual

Esquema de cor



A – Violeta



B – Azul brilhante



F – Verde água



M – Amarelo



P – Laranja

Visão geral e parâmetros técnicos

Parte ajustável do
assento

Controlador manual
com mecanismo
rotativo

Degrau com
mecanismo rotativo





Apoios de pernas

Unidade da
coluna linear



Controlador
por pé

Especificações mecânicas

Comprimento máximo da cadeira (sem apoios de pernas)	1325 ± 10mm
Comprimento máximo da cadeira (com apoios de pernas)	1733 ± 10mm
Comprimento máximo da cadeira (com apoios de pernas tipo Goepel)	1402 ± 10mm
Comprimento máximo da cadeira (com apoios de pernas tipo Goepel com junta dupla)	1495 ± 10mm
Largura total (pelos apoios de pernas)	780–845mm
Largura do estofado (máx.)	630 ± 5 mm
Espessura do estofado	30 ± 2 mm
Altura do assento da cadeira – na posição sentado	615 ± 5 mm
Altura máxima do assento da cadeira (borda frontal)	1043 ± 5 mm
Ângulo de ajuste de parte do apoio das costas até parte do assento	0°±2° / +40° ±2°
Ângulo de ajuste da parte do assento	0°±2° / +20° ±2°
Posição de Trendelenburg	-12°±2°
Degrau acima do chão m[n.	275–540mm
Carga da paciente	180kg
Carga máxima da cadeira	195 kg
Carga permitida do apoio de pernas	32kg
Altura da cadeira (depende da configuração)	85–115kg
Carga permitida do suporte do recipiente	10kg
Carga máxima da barra EU	15kg
Volume do recipiente pendente	2,4 l
Proteção	IPX4
Proteção do controlador por pé	IPX6
Modo de operação	Int. 2/18 min
Nível de ruído	Inferior a 48 dB (A)

Especificações elétricas

Tensão	100 Vca / 110 Vca / 120 Vca / 127 Vca / 230 Vca
Frequência	50/60 Hz
Tensão do motor	24 Vca
Proteção contra penetração da água	IPX4
Classe de proteção do equipamento	I
Classificação das partes incluídas	B
Entrada máxima de alimentação	370 VA
Fusíveis da cadeira	2 x T1.6AL 250 V

Benefícios

Paciente

- Exames ginecológicos e ultrassom em uma cadeira
- Fácil de subir na cadeira
- Design agradável e confortável



- Maior ergonomia ao realizar exames
- Ajuste rápido para as posições mais comuns
- Todos os exames básicos em uma cadeira



Médico

Gerenciamento

- Cadeira com design moderno e confiável
- Manutenção e limpeza simples
- Expansão de funções por meio de uma ampla gama de acessórios



Referências

- (1) Frequência em que as mulheres em todo o mundo visitam ou consultam um obstetra ou ginecologista a partir de 2018, Global Views On Healthcare – 2018, 2018 Ipsos
- (2) Estimativa de incidência e mortalidade de câncer cervical em 2018: uma análise mundial; Marc Arbyn, Elisabete Weiderpass, Laia Bruni, Sílvia de Sanjosé, Mona Saraiya, Jacques Ferlay, Freddie Bray; Lancet Glob Health

- 2020; 8: e191–203; Publicado online em 4 de dezembro de 2019
- (3) Papilomavírus humano (HPV) e câncer cervical, WHO 2019



LINET

Members of LINET Group

LINET Iberia

C/ Bruselas 8, Európolis | 28232 Las Rozas | Madrid, Spain

Tel: +34 91 640 95 50 | Fax: +34 91 640 95 72

E-mail: linetiberia@linet.com | www.linet.com | www.wi-bo.com

