

# Solido 3

Mesa de alimentação universal



## Paciente

- Recurso de inclinação para leitura
- Uma estadia mais agradável na cama



## Pessoal

- Bandeja muito fácil de controlar
- Manuseio ergonômico da bandeja



## Gestão

- Design moderno com opções de cores
- Altamente funcional a um preço acessível



# Solido 3

A mesa Solido 3 é um acessório prático que tornará a estadia do paciente na cama mais agradável. Ela possui vários recursos ergonômicos que tornam o manuseio muito fácil e intuitivo para o paciente e o pessoal da enfermagem.

## Controle simples

A mesa Solido 3 pode ser equipada com uma mola para controlar a direção para cima sem o uso do manípulo de controle.

## Inclinação prática

Uma bandeja para refeições inclinável será apreciada por pacientes ao ler ou usar um tablet.

## Controle ergonômico

Graças aos recursos ergonômicos e à estrutura da coluna especial, o manuseio da bandeja é bastante fácil.

- 1 Uma alça para fácil manuseio.
- 2 Graças ao espaço ampliado, o paciente pode puxar a bandeja para mais perto do corpo, o que facilita o processo de alimentação.
- 3 Ajuste excepcionalmente fácil da altura da bandeja com uma alavanca.
- 4 A trava integrada impede que livros e outros itens caiam, mesmo quando a bandeja estiver inclinada.
- 5 A borda de metal serve como uma trava para itens colocados na bandeja.






## HandyClip

A forma única da coluna permite que você fixe uma presilha que pode ser movimentada verticalmente. Vários acessórios podem ser fixados à presilha – um porta-garrafa, um gancho para recipiente de urina, uma pequena prateleira para o telefone, etc. O paciente sempre tem tudo de que precisa ao alcance da mão.



## Design: funcionalidade e estética

A bandeja de alimentação possui linhas simples, para facilitar a limpeza, e é produzida em vários esquemas de cores. A cor da bandeja pode, assim, ser combinada com a da cama e com dos equipamentos do quarto.

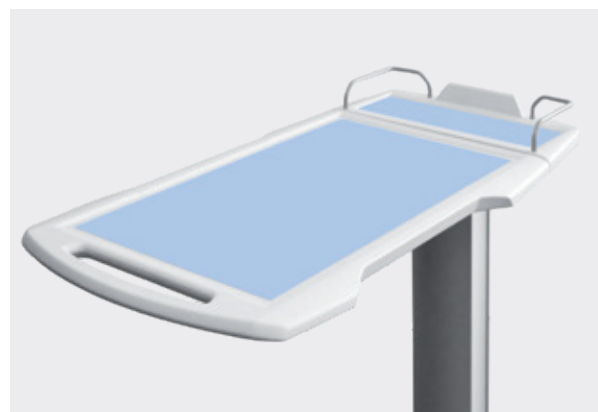

## Detalhes úteis

- A coluna suave, a tecnologia integrada e o design de estrutura prático facilitam a limpeza da bandeja em forma de T.
- A estrutura em forma de T pode ser facilmente encaixada sob a cama, mesmo se houver uma quinta roda.
- Escolha entre:
  - Estrutura com pouca folga e duas pequenas rodas integradas.
  - Estrutura em forma de C com duas rodas maiores de 50 ou 75 mm para mover a bandeja mais facilmente e facilitar sua manutenção.
- Capacidade de carga da bandeja de 30 kg



# Parâmetros técnicos

|   |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Distâncias internas da mesa                         | Parte fixa                      | 11×35 cm                        |
|   | Parte grande                    | 64×35 cm                        |
| Dimensões externas da mesa                          |                                 | 94,5×45 cm                      |
| Ajuste da altura (depende das rodas e da estrutura) | Estrutura em C e rodas de 50 mm | 103×71 cm                       |
|   | Estrutura em C e rodas de 75 mm | 104,5×72,5 cm                   |
|   | Estrutura em T                  | 102×70 cm                       |
| Capacidade de carga                                 | No meio da bandeja              | 30 kg                           |
| Dimensões da estrutura                              | Estrutura em C e rodas de 50 mm | 80,5×44 cm                      |
|   | T                               | 79,5×43,5 cm                    |
| Altura da estrutura                                 | Estrutura em C e rodas de 50 mm | 11,3 cm                         |
|   | T                               | 3,4 cm                          |
| Ângulo de inclinação                                |                                 | 0° – 8° – 21° – 31° – 40° – 48° |



Members of LINET Group

## LINET DO BRASIL

Al. Santos, 787 - cj 32 | São Paulo – SP | Brazil  
tel: +55 11 3284 8404 | e-mail: info\_brasil@linet.com | www.linet.com

