

# Pura



Poltrona multifuncional

# Várias soluções para



## cirurgia ambulatorial Pura

A cadeira é totalmente equipada para cirurgia ambulatorial, recuperação ou procedimentos diagnósticos.

# Tratamento de um dia



## Tratamento Pura

Confortável para diálise, tratamento oncológico e doação de sangue.

# 360° cuidados na poltrona

## O TRANSPORTE É FÁCIL

Transportar o paciente é seguro e não é fisicamente cansativo.



Transporte

Pu

Conforto

## PERMANÊNCIA CONFORTÁVEL

O conforto do paciente é assegurado durante procedimentos longos devido à estrutura ergonômica e estofamento macio.

# Pura

## FOCO NA SEGURANÇA

O design exclusivo dos trilhos laterais garante a segurança do paciente enquanto o mecanismo Soft Drop permite o abaixamento fácil e suave dos trilhos laterais e o fácil acesso ao paciente.

Segurança



Recuperação



## RECUPERAÇÃO E SAÍDA

A posição baixa segura é confortável durante a permanência ou quando sentar ou sair da poltrona.

# Foco na segurança

O novo conceito dos trilhos laterais da poltrona cirúrgica Pura aumenta o nível de segurança dos cuidados ambulatoriais profissionais e propicia aos pacientes maior proteção e conforto. As tecnologias LINET aplicadas auxiliam a ergonomia e facilita significativamente o trabalho da equipe de enfermagem.

## Tecnologia Soft Drop

Os trilhos laterais são equipadas com a tecnologia Soft Drop para otimizar e suavizar o movimento. O abaixamento suave e silencioso dos trilhos laterais é confortável, não apenas para a equipe, mas também torna a permanência do paciente na poltrona mais agradável.




### Posição de Trendelenburg

A posição antichoque, ou posição de Trendelenburg, é usada para colapso de curto prazo é uma das funções pré-configuradas na poltrona Pura.



### RCP mecânica

Um mecanismo rápido permite o ajuste simples de condições ideais de RCP (reanimação cardiopulmonar). A plataforma da poltrona fica nivelada para propiciar um apoio firme durante massagens cardíacas.

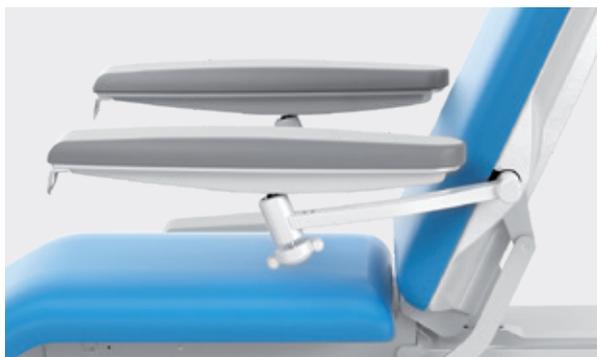

### Apoio de braço ergonômico

A poltrona de tratamento Pura é equipada com apoios de braços confortáveis para permanência longa durante diálise ou terapia de infusão oncológica.

# Variação na posição

O controle elétrico rápido e fácil ajusta a altura da poltrona para trabalho ergonômico com o paciente.

A gama variável de posições da área das costas e pernas permite que a poltrona Pura seja usada de diversas maneiras, desde procedimentos terapêuticos na posição horizontal até ajustes individualizados e fáceis durante longo tempo de permanência na poltrona para procedimentos de tratamento.



## Posição de Fowler

A poltrona Pura permite que você use a chamada posição de Fowler para colocar o paciente em uma posição semideitada para aliviar a dor e o suporte respiratório.



## Aparelho portátil

O aparelho ergonômico e fácil de usar inclui uma posição confortável, reta e TR pré-configurada. Um bloqueio de segurança das funções, o botão GO e outros recursos intuitivos para ajuste fácil e rápido da poltrona.

# O transporte é fácil

Os recursos de direção e manobrabilidade permitem o transporte rápido e seguro do paciente com mínimo esforço físico.

## Transporte fácil e seguro

A estrutura de última geração do chassi com rodízios de 150 cm de diâmetro e um freio central é a melhor opção para transportar pacientes em uma poltrona. Junto com esses detalhes bem projetados, como a alça de transporte ou amortecedores anticolisão para condução em instalações ambulatoriais e hospitalares.



## Alça de transporte

A área de pés pode ser equipada com uma alça resistente que permite o manuseio ergonômico da poltrona, especialmente durante o transporte.



## 5° rodízio

Um 5° rodízio no chassi é um recurso opcional. Este mecanismo engenhoso permite que você manobre a poltrona em espaços confinados, corredores ou elevadores.

# Cuidado seguro e confortável

Para facilitar ao máximo o trabalho da equipe de enfermeiros e equipes, a cadeira Pura introduz um conceito inovador de controle de infecção e um conjunto sofisticado de detalhes práticos.



**Controle de infecção**  
A linha de construção de coluna limpa junto com superfícies compactas forma a base para fácil higienização.



**Suporte para frasco de oxigênio**


Ele foi desenvolvido para colocar o frasco de oxigênio em uma



posição horizontal.

**Caixa de plástico**

Espaço para objetos pessoais.

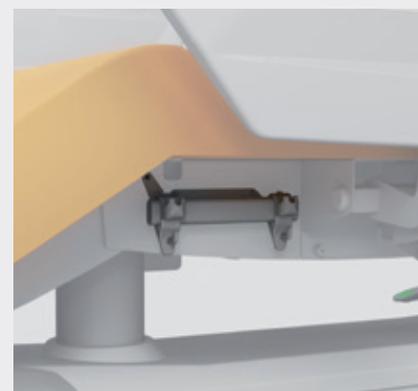

**Suporte de bolsa de urina**

Serve como um alojamento para o saco de urina (2 l no máximo).

O design da poltrona foi adaptado para assegurar que a permanência do paciente seja agradável. O estofamento macio e o material usado para forrar a poltrona são pré-requisitos básicos.



### Sentar e levantar da cadeira

A posição baixa segura é confortável para o paciente durante a permanência e quando sentar ou sair da poltrona.



**Compartimento travável para objetos pessoais**  
Foi desenvolvido para guardar pequenos objetos pessoais do paciente como chaves, celular, carteira etc. O compartimento tem chaves para travar.



**Suporte para rolo de papel**  
Esta poltrona multifuncional está equipada com um suporte para



rolo de papel integrado na área da cabeça.  
**Mesa removível**  
Mesa prática com suporte separado para deixar o paciente ainda mais confortável.

# Parâmetros técnicos

## Tratamento Pura

- 1 Apoio para os braços
- 2 Apoio para os pés
- 3 Suporte para infusão
- 4 Alça de transporte



### Parâmetros técnicos

Comprimento	Área de apoio total	2,123 mm
Largura	Área de assento	590 mm
Altura (rodízios 100 mm)	MÁX. – área de apoio para sentar	934 mm
Altura (rodízios 150 mm)	MÁX. – área de apoio para sentar	970 mm
Rodízios	Diâmetro dos rodízios / freio	100 mm / com acionamento individual
	Diâmetro dos rodízios / freio	150 mm / freio central
Ângulos de ajuste	Área das costas	70°
	Apoio de braço – vertical	+ 42° / – 8,5°
	Apoio de braço – horizontal	360°
Parâmetros elétricos	Proteção contra água e poeira	IPX4
	Classe de proteção do equipamento	I.
	Classificação das partes aplicadas	B
	Tensão das baterias reservas	24 V / 1,2Ah
	Tensão – entrada	100–240 V
Posição de Trendelenburg (TR)		12°
Carga de trabalho segura		205 kg
Peso máximo do paciente		190 kg

## cirurgia ambulatorial Pura



1 Trilhos laterais

3 Suporte para infusão

2 Rodízios

4 Alça de transporte

## OPÇÕES DE COR

Cores padrão



Azul



Amarelo



Laranja



Verde



Lavanda

Cores não padrão



# Pura

Paciente

- Novos trilhos laterais seguros
- Acesso e saída confortáveis
- Alto-suficiência e conforto



- Grau elevado de funcionalidade e melhor ergonomia
- Possibilidades de transporte acima da média
- Fácil limpeza e higienização



Equipe

Gerenciamento

- Um design para maior prestígio
- Excelente relação preço-qualidade



 wissner-  
bosserhoff

**LINET**

Members of LINET Group

**LINET spol. s r.o.**

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Czech Republic

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: [info@linet.com](mailto:info@linet.com) | [www.linet.com](http://www.linet.com)



Fabricante: Borcad Medical a. s., 739 45 Fryčovice 673, Czech Republic, Membro do LINET Group

LINET | Art. nº 9601-1070 | Edição 06/2021 | Diferentes tons de cores possíveis. O direito de alterar os parâmetros técnicos está reservado.