

Eleganza 4

CAMA PARA TERAPIA INTENSIVA



Solução de terapia intensiva personalizada

Eleganza 4: Solução de tera



pia intensiva personalizada



Solução personalizada

Eleganza 4 é uma cama de posicionamento elétrico – criada especialmente para Unidades de Terapia intensiva. A plataforma da cama oferece soluções flexíveis e personalizadas para reunir todas as atividades de terapia e todas as necessidades especiais do paciente com uma arquitetura aberta de diferentes recursos técnicos. Você pode escolher o lado certo da cama para cada aplicação terapêutica e de acordo com a condição do paciente.



UMA CAMA

=

várias possibilidades



Unidades Neurológicas



Unidades Respiratórias



Unidades Semi-intensivas



Unidades pós-cirúrgica



Durante todo o tratamento

A maioria dos tratamentos e terapias na unidade intensiva se concentram na cabeça e no tórax do paciente. A Eleganza 4 permite acesso completo à parte superior do corpo do paciente. O conceito único das grades ajuda a equipe nas atividades de rotina bem como em situações críticas – precisão, conveniência e ergonomia em todos os momentos.









Foco na parte superior do corpo

Com os controle integrados em ambas as grades superiores, o cuidador tem acesso direto a todas as funções e opções de ajuste da cama. Projetada com a tecnologia SoftDrop, que permite uma abordagem do paciente totalmente irrestrita. Essa oportunidade proporciona o trabalho mais ergonômico e economiza esforço físico e tempo.





Estratégia Free-hands

O ajuste de altura da cama e a posição de procedimento podem ser configurados pelos pedais. As mãos do enfermeiro ficam livres para cuidar ou lidar com o paciente.

- Simples de alcançar
- Simples de usar



Melhor segurança do paciente

A segurança do paciente é prioridade. A cama Eleganza 4 é equipada com funções sofisticadas que protegem o paciente em diferentes circunstâncias.



i-Brake

O freio automático previne quedas causadas por uma cama instável, especialmente durante o movimento de saída da cama.



Alarme de saída da cama

O sistema monitora o movimento do paciente na cama e na saída da cama. Ele pode ser configurado em dois modos dependendo da demanda e mobilidade do paciente.







O conceito de grades laterais

O conceito e a altura das grades otimizam as necessidades do paciente:

- Risco de esmagamento
- Uso de sistemas de colchões passivos e ativos diferentes
- Prevenção de quedas

Luz noturna

A função de luz dá suporte a uma melhor orientação do paciente à noite e oferece uma sensação de segurança.

Parada de 30° e 45°

O dorso para automaticamente em uma inclinação de 30 e 45 graus. Além disso, o Ergoframe dá suporte a uma posição confortável e segura em relação à prevenção de úlcera por pressão, além de uma ventilação adequada dos pulmões.

Parada segura

A cama para automaticamente ao posicionar-se na posição mais baixa.

EMR integrado

A Eleganza 4 é equipada tecnologicamente para

enviar dados para o sistema de informações do hospital. As informações selecionadas sobre o status da cama e o paciente estão disponíveis e podem ser exibidas no painel de controle e no SafetyMonitor.



Melhora do conforto do paciente

A Eleganza 4 foi criada para ajudar o paciente e dar suporte ao resultado clínico. Toda a linha de recursos específicos da cama ajuda o paciente a tornar-se mais autoconfiante e fornece maior conforto.





Para uma maior independência

O paciente possui acesso imediato a dois controles separados para posicionamento básico da cama. Esse é um controle integrado nas grades e um controle separado do paciente que pode ser suspenso nas grades.







Para obter um fluxo de trabalho otimizado

Balança

A balança possibilita que decisões rápidas e seguras sejam tomadas no tratamento do paciente. A medida do peso do paciente pode ser realizada confortavelmente e sem estresse para o paciente e para a equipe de enfermeiros, e sem os riscos adicionais da movimentação do paciente.

Raios X

Com a plataforma de colchão radiotransparente e a composição especial da cama, imagens de raios X dos pulmões podem ser obtidas sem a necessidade de manuseio físico do paciente.



i-Drive Power

A 5ª roda integrada e motorizada e o sistema de transporte do paciente minimizam a intervenção da equipe ao empurrar a cama e reduzem lesões nas costas e outras doenças musculoesqueléticas que afetam a equipe. Os riscos do transporte de pacientes na cama são reduzidos para garantir segurança e conveniência máximas.



Melhor gerenciamento de feridas

O amplo portfólio de colchões LINET passivos, ativos e híbridos dá suporte às necessidades individuais do paciente em relação à prevenção e terapia de úlceraTecnologias inovadoras dão suporte a um melhor resultado no ponto de tratamento com recomendações baseadas em evidências.



90%

das úlceras por pressão podem ser evitadas*







Eleganza 4 + Virtuoso



Eleganza 4 + Clinicare 100HF



Eleganza 4 + Clinicare 30




Eleganza 4 + Clinicare 20



O Ergoframe


Esse recurso aumenta o conforto e a ergonomia do paciente quando está deitado na cama e minimiza a compressão dos pulmões e da área abdominal.

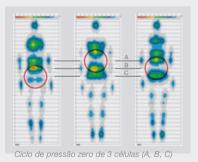

Tecnologia moderna

Função dos colchões LINET com base nas melhores tecnologias que usam resultados clínicos.



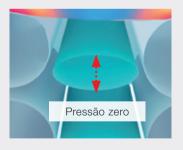

Pressão zero

O Virtuoso, com tecnologia de 3 células, oferece os benefícios de Pressão zero para obter prevenção máxima, aplicação regular e remoção da pressão para a máxima terapia.



Mobilização ativa passo a

Devido a suas funções especiais, a Eleganza 4 ajuda a lidar com o problema da mobilização, que é uma das questões essenciais, especialmente em unidades de tratamento crítico e intensivo. Uma mobilização rápida e, acima de tudo, segura com participação ativa do paciente aumenta a independência e cria um melhor resultado.



passo



Etapa 1: O paciente se senta na posição ereta sobre a cama usando as grades laterais ergonômicas e o Mobi-Lift®.

Etapa 2: o paciente se senta na posição ereta, inclinada para frente, com o "nariz alinhado aos dedos dos pés", com os pés no chão. O corrimão ergonômico das grades laterais e o Mobi-Lift® oferecem estabilidade

Etapa 3: Graças ao botão no Mobi-Lift®, o paciente pode definir a altura da cama, o que o ajuda o levantar-se suavemente. O enfermeiro auxilia com menos esforço.







Alça Mobi-Lift®

O Mobi-Lift® é um recurso exclusivo das camas LINET. É usado para dar um suporte firme para o paciente se sentar ou sair do leito. O paciente pode configurar a cama para a saída de forma fácil, usando o botão para cima ou para baixo.



CLÍNICO

Em média, verifica-se uma perda diária de massa muscular de 2 a 3% nos primeiros 10 dias.* Oferece ao paciente suporte adequado para uma rápida mobilização.

Posicionamento



Trendelenburg



Trendelenburg reverso



Posição vascular



Ergoframe com dorso levantado em 30°



Posição mais baixa



Posição de tratamento



Posição cardíaca



Trava para dorso em 30°

Soluções que melhoram de acordo com suas necessidades

Uma plataforma. Muitas soluções.

Cada investimento no hospital deve retornar de várias formas: melhora dos resultados, otimização do fluxo de trabalho, melhora do tratamento do paciente e diminuição de custos.

A abrangente plataforma da Eleganza 4 permite que você personalize a cama certa de acordo com as necessidades específicas de cada área de tratamento. Recursos diferentes da arquitetura aberta da Eleganza 4 podem atender ao seu ambiente hospitalar e à necessidade de controlar custos.



Unidade pós-cirúrgica



Unidade semi-intensiva



Unidade neurológica



Unidade respiratória

Eleganza 4 – Cama de tratamento intensivo para requisitos diferentes

Eleganza 4 Cuidado BÁSICO



Sua escolha:

- Opções de painel diferentes
- Suporte integrado
- Mobi-Lift®

Eleganza 4 SEGURANÇA



Sua escolha e foco na segurança:

- Luz noturna
- Alarme i-Brake
- Alarme de saída da cama

Eleganza 4 MOBILIZAÇÃO



Sua escolha com foco na mobilidade:

- i-Brake
- Controle para pés
- 5ª roda
- EMR integrado

Eleganza 4 Cuidado PROFISSIONAL



Sua escolha com foco adicional em uma cama de tratamento intensivo profissionalmente equipada:

- 5ª roda motorizada com i-Drive
- Cobertura de todo o chassi
- Radio-transparente
- EMR incorporado e SafetyMonitor

Selecione as opções corretas para as necessidades específicas dos seus pacientes!



Manutenção

O conceito modular da cama oferece uma variedade de benefícios econômicos.

A plataforma de uma cama consiste das mesmas peças sobressalentes, resultando em uma manutenção efetiva e economicamente mais conveniente.

- Mesmas peças para todos os modelos
- Rápida resposta em caso de defeito
- Manutenção em qualquer lugar do mundo



A LINET oferece assistência técnica com regularidade e um serviço de qualidade dentro do âmbito de diversos tipos de acordos. O Contrato de assistência técnica garante 100% do desempenho da cama e do colchão.

Treinamento

- Instalação profissional e treinamento de equipe para funcionamento adequado e uso das funções
- Workshops e cursos de treinamento profissional
- Técnicos autorizados e experientes periodicamente treinados
- Possibilidade de treinamento diretamente em seu hospital







Simples reprocessamento de higiene da cama

A construção da coluna, superfícies lisas e uniformes, bem como peças de plástico removíveis facilitam limpeza e desinfecção mais fáceis e completas.



Flexibilidade

Opções de painel










Opções de chassi





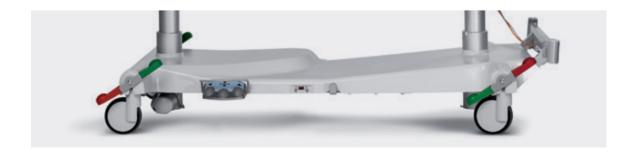



LINET



Certificados

A LINET é uma empresa certificada segundo as normas e os sistemas de qualidade europeus: EN ISO 9001, EN ISO 13485.

Os produtos são fabricados de acordo com as normas europeias para tecnologia médica e camas hospitalares: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, EN 45501, 93/42/EEC, 2014/31/EU, 2011/65/EU.

Características elétricas

Alimentação	230 V AC, 50/60 Hz
Potência máxima de entrada	370 VA
Proteção contra água e pó	IP X4
Tipo de proteção contra corrente elétrica	Classe I
Nível de proteção contra lesões por corrente elétrica	Peça aplicada tipo B
Modo de funcionamento do motor elétrico (fator de carga)	máx. 2 min. ON /18 min. OFF

Parâmetros técnicos

Dimensões externas	217,5×100 cm
Extensão da cama	0-22 cm
Dimensões do colchão	208×90cm
Altura das grades laterais acima da plataforma do colchão	45 cm
Ajuste da altura	41-79 cm
Inclinação TR/ATR	14°/14°
Ângulo do dorso	65°
Ângulo do assento	25°
Carga máxima de segurança	250 kg
Peso máximo do paciente	185 kg

Eleganza 4

- Melhorar a segurança e o conforto do tratamento dos
- Foco no tratamento e mobilização ativa
- Prevenção de lesões por



- Auxilia os resultados clínicos do paciente.
- Atividades diárias de enfermagem simplificadas
- Manipulação mais fácil graças aos elementos de controle integrados nas grades laterais superiores







- Solução sustentável que melhora de acordo com as necessidades
- A oferta complexa da LINET inclui serviços e treinamento avançados









Members of LINET Group



Al. Santos, 787 - cj 32 | São Paulo - SP | Brazil tel: +55 11 3284 8404 | e-mail: info_brasil@linet.com | www.linetbrasil.com/pt-BR

