

# Multicare



Cama para terapia intensiva

# Multicare vire para o melhor







# 100%

auxílio para funcionários  
e pacientes

# Benefícios da Multicare







- Menos complicações pulmonares com a terapia lateral automática (ALT®)
- Recuperação rápida com o sistema Mobi-Lift®
- Redução de quedas com o conceito de grade lateral, o alarme de saída da cama e o sistema i-Brake



Paciente

- Menor esforço físico e facilitando o manuseio do paciente com o sistema de inclinação lateral
- Transporte seguro e rápido com o sistema i-Drive Power
- Diminuição da necessidade de reposicionamento com o Ergoframe®



Profissional

- Redução de custos adicionais por pneumonias associadas a ventilação (PAV), quedas, infecções e úlceras por pressão
- Poupança de tempo dos funcionários para tarefas qualificadas
- Gastos de tratamento otimizados devido à redução do tempo de hospitalização



Gerenciamento

# A Multicare é intuitiva

## INCLINAÇÃO LATERAL BASEADA NA PLATAFORMA

- Auxílio no manuseio do paciente com esforços mínimos
- Simplificação e ergonomia em atividades cotidianas da enfermagem, tais como higienização, reposicionamento, auxílio em necessidades fisiológicas e troca de curativos.
- Vire o paciente para o lado facilmente com a inclinação lateral.





# aos funcionários



## LESÕES NAS COSTAS

Ergonomicamente correto



Cama Multicare com inclinação lateral.  
lateral.

Ergonomicamente incorreto

52% dos enfermeiros queixam-se de  
dores crônicas nas costas.



Cama sem inclinação lateral. Grande risco  
de lesão na região lombar das costas.



## A INCLINAÇÃO LATERAL

Ela pode minimizar os esforços despendidos pelos funcionários da UTI e otimizar as condições de trabalho durante outras atividades, tais como a mobilização e a transferência da cama para a maca..



RECUPERAÇÃO RÁPIDA E MAIOR CONFORTO



MENOS LESÕES NAS COSTAS E ESFORÇO FÍSICO



REDUÇÃO DE CUSTOS ADICIONAIS DEVIDO A LESÕES  
OCUPACIONAIS DE FUNCIONÁRIOS E EFEITOS DA SÍNDROME  
DA IMOBILIDADE



# A Multicare é intuitiva





# aos funcionários



## MOBI-LIFT®

- Auxílio no levantamento seguro dos pacientes, com esforços mínimos.
- Solução única da LINET, combina uma manete de apoio com um ajuste de altura para a saída.
- Permite a participação ativa do paciente.
- Minimiza o risco de síndrome da imobilidade através da mobilização precoce.



## I-DRIVE POWER

- Transporte motorizado de pacientes com esforços mínimos.
- O elemento exclusivo Safety Sense™ evita o risco de autoativação, ativação não intencional ou uso indevido.
- O acelerador inteligente otimiza a velocidade de condução em diferentes situações de movimentação.

# Absolutamente segura





A segurança é um elemento chave na Multicare. Todas as funções da cama são definidas para que o paciente não só se sinta, mas esteja tão seguro quanto possível.

**SAFEPlus**  
CONCEPT




## GRADES LATERAIS MULTI PROTECT

As grades laterais progressivas com conceito de vãos seguros e sensores da grade detectores para posição abaixada, além de sua altura única, fornecem uma proteção superior contra quedas.



## I-BRAKE

Travas automáticas impedem movimento descontrolado e quedas causadas por situações de pessoas apoiadas na cama destravada.

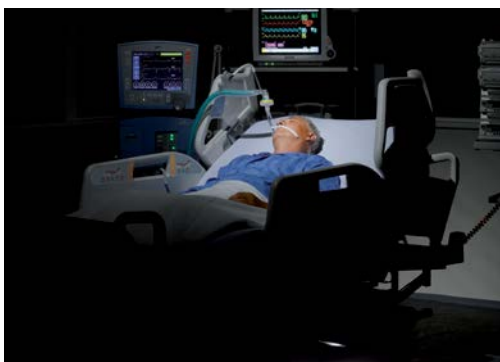

## ALARME MULTIZONAL DE SAÍDA DA CAMA

O alarme sonoro adequado pode ser selecionado de acordo com o risco de queda de cada paciente. Este elemento permite que os funcionários limitem o risco de queda de forma permanente e reajam assim que necessário.



## BOTÃO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM

O botão de chamada de enfermagem está sempre ao alcance das mãos, para prevenção de situações perigosas ou para chamada de funcionários para assistência habitual.

# Pronta para a prevenção







## TERAPIA LATERAL AUTOMÁTICA (ALT®)

A terapia lateral automática é um sistema de inclinação da plataforma programado de forma individual em ciclos para otimizar a drenagem dos pulmões e prevenir a PAV 1,2.



## CADEIRA ORTOPNEICA

A posição em cadeira ortopneica potencializa a função respiratória e o conforto do paciente.



DRENAGEM MAIS FÁCIL DOS PULMÕES E MENOR ESFORÇO FÍSICO NO MANUSEIO DE PACIENTES



MENOR INCIDÊNCIA DE COMPLICAÇÕES PULMONARES COM A TERAPIA LATERAL AUTOMÁTICA (ALT®) E A CADEIRA ORTOPNEICA



DIMINUIÇÃO DE CUSTOS ADICIONAIS RELACIONADOS A PAV, SDRA OU DPOC E REDUÇÃO DO TEMPO DE HOSPITALIZAÇÃO

# Prevenção de úlceras



## PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO

A arquitetura aberta da Multicare permite a utilização de diversos sistemas de colchões para prevenção ou recuperação de úlceras de pressão, de acordo com as necessidades de cada paciente.



*Virtuoso com pressão zero e tecnologia tricolor.*



*OptiCare com design integrado.*



## O ERGOFRAME®

Sistema que aumenta o conforto e ergonomia do paciente quando deitado na cama e minimiza a compressão dos pulmões e da área abdominal.



## A INCLINAÇÃO LATERAL

Auxilia enfermeiros no reposicionamento rotineiro e preventivo do paciente. Este tratamento básico de prevenção pode ser realizado de forma eficaz com esforços e riscos mínimos de lesão nas costas.

# A Multicare é prática

## MULTIBOARD

O painel de controle de fácil acesso e com interface de usuário intuitiva está orientado para indicar a posição da cabeceira a 30°.



## I-DRIVE

O 5º rodízio retrátil do sistema i-Drive permite a redução do esforço exigido dos funcionários para transporte e condução da cama.







## BANDEJA LATERAL PARA CASSETTES DE RAIOS X

O suporte lateral para cassettes de raios X permite a possibilidade de exames de imagens seguros do tórax sem necessidade de reposicionamento do paciente na cama.



## BALANÇAS

O sistema avançado de pesagem integrado à cama Multicare é capaz de indicar o peso exato do paciente na maior parte das posições da cama. Isso fornece não só o valor atual do peso do paciente, mas também dados importantes acerca de mudanças de peso ao longo do tempo.



## CONTROLES PARA OS PÉS

Ajuste confortável da altura e da inclinação lateral com as mãos livres.



## TECLAS ILUMINADAS PARA PACIENTES

Permitem melhor orientação do paciente à noite.

# Controle de infecções







## DESINFECÇÃO PERFEITA

A construção da coluna, com superfícies lisas e inteiriças, permite uma descontaminação simples e completa.



## TRATAMENTO ANTIMICROBIANO COM SANITIZED®

O tratamento com Sanitized® das superfícies de contato mais comuns da Multicare reduz o crescimento e a atividade de diversos micróbios. A atividade de íons de prata naturais é segura para contato com o paciente e dura por toda vida útil da cama. Esse tratamento é um complemento aos elementos de higiene padrão da cama Multicare da LINET, sem custos adicionais.

### Sanitized®

- Protege o polímero contra deterioração microbiana e fúngica.
- Seguro para contato com o paciente.
- Resistente à limpeza e de longa duração.
- Utiliza íons ativos de prata naturais.
- Adicional a outros elementos de higiene da cama.
- Elemento padrão da cama.

Este folheto contém informação sobre produtos que podem ou não estar disponíveis em determinado país, e que, se relevante, podem ter recebido aprovação ou autorização para comercialização por corpos regulatórios governamentais, com indicações ou restrições distintas em diferentes países. Cada país possui leis, regulamentos e práticas médicas específicas sobre a comunicação de informações médicas ou outras informações sobre produtos médicos na internet. Nada aqui contido deve ser interpretado como uma solicitação ou promoção de qualquer produto, ou como uma indicação de qualquer produto que não esteja aprovado pelas leis e regulamentos do país de residência do leitor.

Sanitized® não reduz nem protege o usuário deste artigo contra bactérias causadoras de doenças.



# Cama inteligente

A cama inteligente Multicare LINET pode ser equipada para fornecimento de informação acerca da segurança do paciente, do estado da cama e de suas necessidades de manutenção sem necessidade de treinamento complexo – sua utilização é simples.



## SafetyMonitor

O sistema inteligente SafetyMonitor melhora o gerenciamento do risco, especificamente no cenário de assistência a pacientes de ambiente hospitalar de cuidados intensivos. O sistema automaticamente coleta informação sobre elementos de segurança da cama e os apresenta para a enfermagem de forma intuitiva.







## Informações sobre o SafetyMonitor

podem ser visualizadas onde necessário: iPad, smartphone, PC.



## BedMonitor

O conforto do paciente é mantido com o uso de tecnologia sem necessidade de contato, que monitora continuamente os elementos de segurança da cama (altura da cama, posição das grades laterais, ângulo do encosto, ativação das travas).

# Parâmetros básicos





# da cama



## CERTIFICADOS

A LINET é uma empresa certificada segundo as normas e os sistemas de qualidade europeus: EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003.

Os produtos são fabricados de acordo com as normas europeias para tecnologia médica e camas hospitalares:  
EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-2-52,  
EN ISO 14971, 93/42/CEE, 90/384/CEE.

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentação	230 V AC, 50 /60 Hz
Potência máxima de entrada	370 VA
Proteção contra água e pó	IP X4
Tipo de proteção contra corrente elétrica	Clase I
Nível de proteção contra lesões por corrente elétrica	Peça aplicada tipo B
Modo de funcionamento do motor elétrico (fator de carga)	máx. 2 mín ON/ 18 mín OFF

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões externas	215×105 cm (posição mais curta da plataforma do colchão)
	237×105 cm (posição mais longa da plataforma do colchão)
Dimensões do colchão	208 × 86 cm
Altura máx. do colchão	23 cm
Ajuste da altura	44–82 cm
Inclinação lateral	±30°
Inclinação TR/ATR	13°/16°
Peso (equipamento base)	224 kg
Carga máxima de segurança	250 kg



# Multicare

Paciente

- Menos complicações pulmonares com o ALT®
- Recuperação mais rápida com o Mobi-Lift®
- Redução de quedas com o conceito de grade lateral, o alarme de saída do leito e o sistema i-Brake



- Menor esforço físico e manuseio facilitado do paciente com o sistema de inclinação lateral
- Transporte seguro e rápido com o sistema i-Drive Power
- Diminuição da necessidade de reposicionamento com o Ergoframe®



Personal

Administração

- Redução de custos adicionais por pneumonias associadas a ventilação (PAV), quedas, infecções e úlceras por pressão
- Poupança de tempo dos funcionários para tarefas qualificadas
- Gastos de tratamento otimizados devido à redução do tempo de hospitalização



 wissner-  
bosserhoff

**LINET**

Members of LINET Group

## LINET DO BRASIL

R. General Osório 329 | 09310-050 Mauá, São Paulo | Brazil  
e-mail: [info\\_brasil@linet.com](mailto:info_brasil@linet.com) | [www.linet.com](http://www.linet.com)

